

1. RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS

- ❖ Faire porter un masque chirurgical au patient à prélever
- ❖ Le préleveur s'équipe de lunettes de protection, d'un masque FFP2, d'une surblouse, de gants à usage unique et d'une charlotte.
- ❖ Faire asseoir le patient

/!\ SE PLACER LATÉRALEMENT PAR RAPPORT AU PATIENT

- ❖ Faire descendre le masque chirurgical du patient en dessous du nez.

> EXEMPLES DE MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT

PCR Media Roche



Écouvillon UTM (bouchon rouge)



Eswab (milieu amiès)



Vacurette (bouchon rouge)



Hologic (bouchon gris)




Conférer le manuel de prélèvement Labosud pour consulter la liste exhaustive du matériel de prélèvement.

> PRÉLÈVEMENT NASO-PHARYNGÉ PAR ÉCOUVILLONNAGE

- ❖ Maintenir la tête du patient inclinée en arrière,
- ❖ Insérer l'écouvillon dans **une narine** et le pousser délicatement parallèlement au palais, perpendiculairement à l'axe du visage jusqu'à la butée du naso-pharynx. *En cas de difficulté lors de l'introduction de l'écouvillon (déviation cloison...), tenter l'insertion par l'autre narine : dans la majorité des cas elle est aisée.* Imprimer un mouvement rotatif pendant quelques secondes.
- ❖ Faire remettre le masque chirurgical au patient
- ❖ Insérer l'écouvillon au fond du tube dans le milieu de transport, décharger pendant au moins 5 secondes puis essorer l'écouvillon sur la paroi du tube. Jeter l'écouvillon avec prudence dans le fut ou le container à DASRI. **Veiller à bien refermer le tube** de façon étanche.
- ❖ Identifier le tube avec un stylo indélébile : nom de naissance, 1^{er} prénom, date de naissance et sexe du patient.
- ❖ Placer le prélèvement dans le sachet de transport dédié.

Présenter l'écouvillon à 90° de l'axe du visage

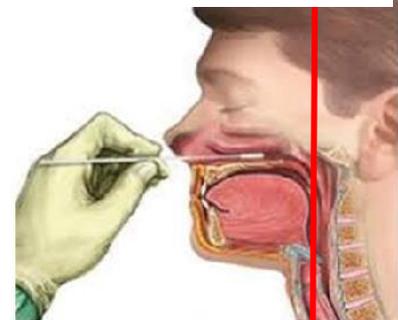

Axe du visage

> PRÉLÈVEMENT ORO-PHARYNGÉ PAR ÉCOUVILLONNAGE

- ❖ Maintenir la tête du patient inclinée en arrière,
- ❖ A l'aide d'une spatule en bois, bien pousser la langue vers le bas
- ❖ Insérer l'écouvillon en évitant de toucher les lèvres, les dents, la langue, les joues ou la luette
- ❖ Frotter en douceur de manière ciblée la portion postérieure du pharynx et les amygdales avec l'écouvillon
- ❖ Faire remettre le masque chirurgical au patient
- ❖ Insérer l'écouvillon au fond du tube dans le milieu de transport, décharger pendant au moins 5 secondes puis essorer l'écouvillon sur la paroi du tube. Jeter l'écouvillon avec prudence dans le fut ou le container à DASRI.
Veiller à bien refermer le tube de façon étanche.
- ❖ Identifier le tube avec un stylo indélébile : nom de naissance, 1^{er} prénom, date de naissance et sexe du patient.
- ❖ Placer le prélèvement dans le sachet de transport dédié.



> PRÉLÈVEMENT SALIVAIRE (cf : RI-ENR.125)

> ASPIRATIONS BRONCHIQUES, ASPIRATIONS NASO-PHARYNGÉES, LBA

- ❖ Utiliser les mêmes écouvillons que pour le prélèvement naso-pharyngé.
- ❖ Tremper l'écouvillon dans le flacon d'aspiration ou déposer environ 1mL dans le tube de l'écouvillon avec milieu de transport.
- ❖ Insérer l'écouvillon au fond du tube dans le milieu de transport, décharger pendant au moins 5 secondes puis essorer l'écouvillon sur la paroi du tube. Jeter l'écouvillon avec prudence dans le fut ou le container à DASRI.
Veiller à bien refermer le tube de façon étanche.
- ❖ Identifier le tube avec un stylo indélébile : nom de naissance, 1^{er} prénom, date de naissance et sexe du patient.
- ❖ Placer le prélèvement dans le sachet de transport dédié.

2. EMBALLAGE ET TRANSPORT DU PRÉLÈVEMENT

> EMBALLAGE / TRANSPORT DU PRÉLÈVEMENT

- ❖ Conférer les fiches examens détaillées sur le manuel de prélèvement : <https://labosudb.manuelprelevement.fr/Default.aspx>